

# OXÍMETROS DE PULSO MORIYA



## Modelo 1001

### Oxímetro de Pulso

O Oxímetro de Pulso Modelo 1001 é um Monitor portátil totalmente automático Para monitorização contínua da saturação periférica de O<sub>2</sub> (SpO<sub>2</sub>) e a Frequência Cardíaca de pacientes adultos, pediátricos e neonatais.

Utiliza sensores não invasivos do tipo dedo ou multi-site (multiposição).

Display gráfico de cristal líquido com iluminação de alto contraste para facilitar a visualização, apresenta os valores de SpO<sub>2</sub>, Frequência cardíaca e qualidade de sinal captado.



Mensagens na tela em português para ocorrências de falha de sensor, procurando pulso e alarme de procura muito longa.

Opera com 4 Pilhas AA (110 horas de autonomia).






Sensor de oximetria

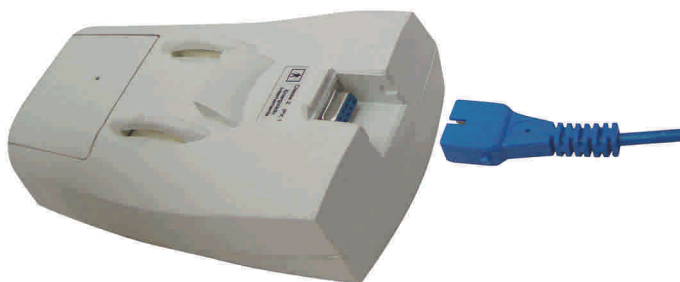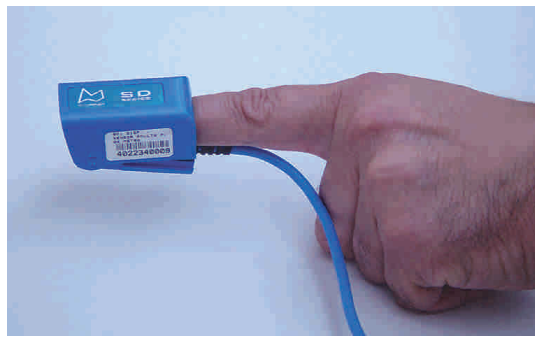

Conexão do Sensor

Funções do painel

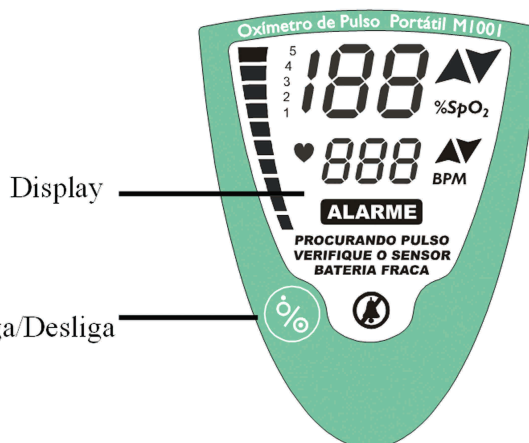

## Oxímeter de Pulso Mod. 1001

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

#### SpO2:

Faixa de medição: 0-99% SpO2 Funcional (incrementos de 1%)

#### Precisão

- **Adulto:** +/- 2% de 70-100% SpO2- não definido para valores abaixo de 70%

- **Neonatal:** +/- 3% de 70-100% SpO2 - não definido para valores abaixo de 70%

Média: 8 batimentos

#### Pulso

Faixa de medição: 30 - 254 BPM (incrementos de 1 BPM)

Precisão: +/- 2 bpm ou +/- 2%, o que for maior

Média: 8 segundos

#### Fonte de alimentação:

4 Pilhas AA Alcalina 1,5V com acesso para troca externo (com autonomia de funcionamento de 110 horas à plena carga).

**Dimensões (AxLxP):** 163 x 95 x 63mm

**Peso:** 400g (com pilhas)


Classe de risco: equipamento classe II - Tipo BF

Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX1

Certificados NBR IEC 60601 e NBR ISO 9919

NBR IEC 60601-2-27:1997 / NBR IEC 60601-2-30:1997 / NBR IEC 60601-2-49:2003

Teste de compatibilidade eletromagnética

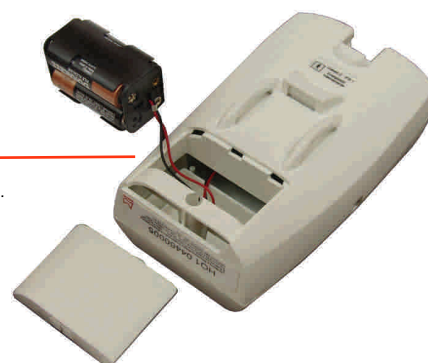

J.G.Moriya Ind. Com. de Equip. Médico Hospitalares Ltda.

Unidade I - - Rua Colorado, 279, 285 e 291

CEP 04225-050 - Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP

Tel.: 55 11 6914-9716 - Fax: 5511 6914-1943

Email: [jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br) - [www.jgmoriya.com.br](http://www.jgmoriya.com.br)

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.

Unidade II - Rua da União, 377, 381 e 405

CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP

Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302

