

# Painéis Suspensos JG Moriya

## Linha Delta

**Unidade de trabalho com suporte para monitores e acessórios, rede de gases e eletricidade**



## Modelo ERGO


Os Painéis J. G. Moriya são concebidos e fabricados de acordo com a necessidade e solicitação do cliente, um conceito inovador no mercado nacional e utiliza os mesmos conceitos internacionais de qualidade e tecnologia dos outros equipamentos de nossa linha de fabricação. As caixas podem ser confeccionadas em chapas de aço carbono, alumínio, aço inox ou perfil de alumínio. A disposição e quantidade dos pontos de gases, tomadas elétricas, suportes de soro são definidas pelo cliente; e toda essa vantagem está associada ainda ao cumprimento das normas ABNT.



Os painéis Linha Delta têm como função direcionar a alimentação elétrica e de gases próximo aos equipamentos que estarão sendo utilizados dentro de uma unidade de terapia intensiva, tais como ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de infusão, etc. A forma construtiva do produto permite melhor distribuição destes equipamentos, além de permitir ao usuário mobilidade, ergonomia, facilidade no manuseio e conseqüentemente agilidade nos procedimentos.



Projeto conforme a necessidade do cliente

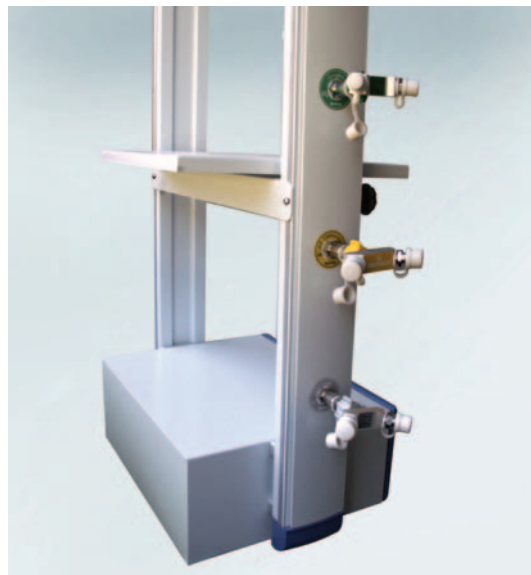


Pontos de gases: corpo confeccionado em latão cromado com rosca padrão para o gás correspondente com pino de impacto, evitando vazamento fora de uso. As rosca dos pontos de gás são normatizadas de acordo com a ABNT NBR 11906:1992. A identificação dos gases é feita através de etiquetas com cores normatizadas conforme ABNT NBR 12188:2003. Tampão de PVC para proteção das rosca das conexões. Tubulação interna realizada através de mangueiras em poliuretano, devidamente identificadas pela cor conforme normas vigentes.



Tomadas elétrica universal 2P+T ou tripolar, conexões internas conforme norma ABNT NBR 5410:2004 e fios de 2,5mm.



Caixa com ponto de gases e tomadas elétricas para acoplar acessórios de gasoterapia como: Fluxômetros, Aspiradores, Umidificadores, Nebulizadores, etc.

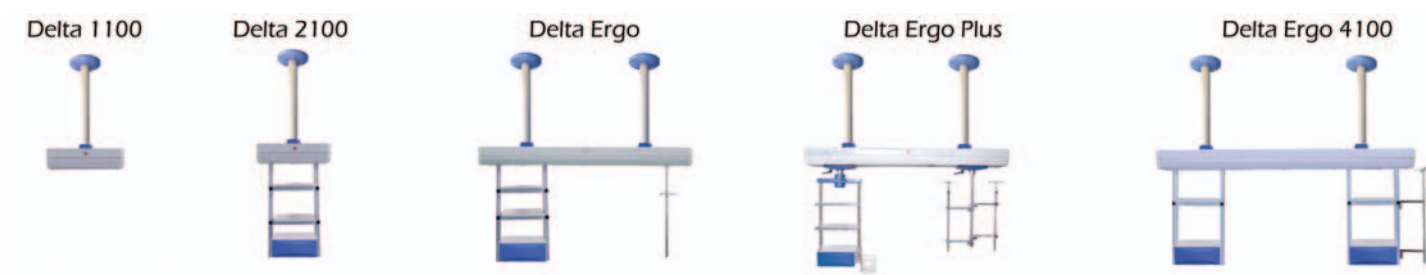

**J.G.Moriya Ind. Com. de Equip. Médico Hospitalares Ltda.**  
**Unidade I** - - Rua Colorado, 279, 285 e 291  
 CEP 04225-050 - Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP  
 Tel.: 55 11 6914-9716 - Fax: 55 11 6914-1943

Email: [jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br) - [www.jgmoriya.com.br](http://www.jgmoriya.com.br)

**J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.**  
**Unidade II** - Rua da União, 377, 381 e 405  
 CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP  
 Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302

