

Painéis Suspensos JG Moriya

Linha Delta


Unidade de trabalho com suportes para monitores e acessórios (com sistema giratório), rede de gases e eletricidade, Hastes de soro e Bombas de Infusão



Modelo ERGO PLUS

Os Painéis J. G. Moriya são concebidos e fabricados de acordo com a necessidade e solicitação do cliente, um conceito inovador no mercado nacional e utiliza os mesmos conceitos internacionais de qualidade e tecnologia dos outros equipamentos de nossa linha de fabricação. As caixas podem ser confeccionadas em chapas de aço carbono, alumínio, aço inox ou perfil de alumínio. A disposição e quantidade dos pontos de gases, tomadas elétricas, suportes de soro são definidas pelo cliente; e toda essa vantagem está associada ainda ao cumprimento das normas ABNT.

Os painéis suspensos basicamente têm como função direcionar a alimentação elétrica e de gases próximo aos equipamentos que estarão sendo utilizados dentro da UTI, tais como ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de infusão, etc. A forma construtiva do produto permite melhor distribuição destes equipamentos, além de permitir ao usuário mobilidade, ergonomia, facilidade no manuseio e consequentemente agilidade nos procedimentos.

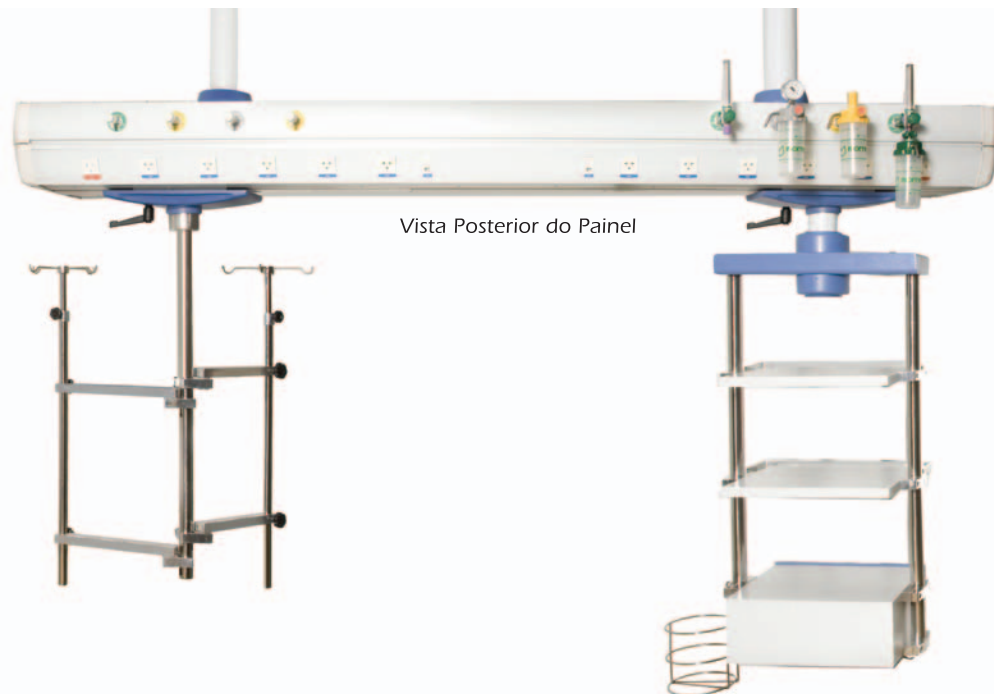


Vista Posterior do Painel

Pontos de gases: corpo confeccionado em latão cromado com roscas padrão para o gás correspondente com pino de impacto, evitando vazamento fora de uso.

As roscas dos pontos de gás são normatizadas de acordo com a ABNT NBR 11906:1992. A identificação dos gases é feita através de etiquetas com cores normatizadas conforme ABNT NBR 12188:2003. Tampão de PVC para proteção das roscas das conexões. Tubulação interna realizada através de mangueiras em poliuretano, devidamente identificadas pela cor conforme normas vigentes.

Tomadas elétricas universal 2P+T ou tripolar, conexões internas conforme norma ABNT NBR 5410:2004 e fios de 2,5mm.

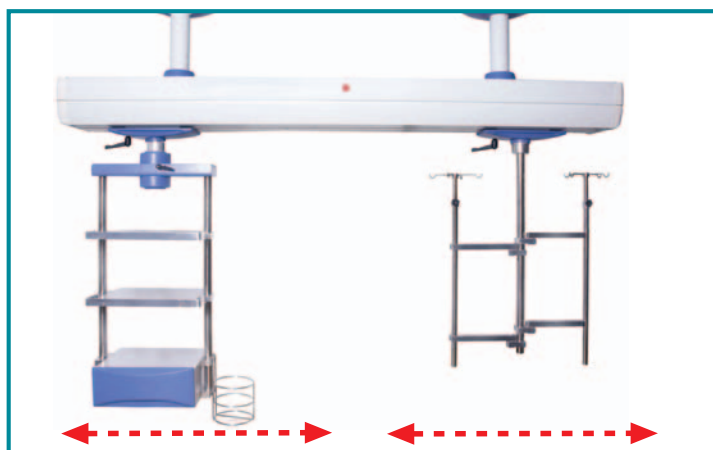

Tomadas elétricas de 110V e 220V e Postos de Gases na parte posterior para acoplar acessórios de gasoterapia: Fluxômetros, Aspiradores, Umidificadores, Nebulizadores, etc.

- Sistema de trilhos permitem movimentos laterais (e rotação) tanto das preteleiras quanto do suporte para soro/bomba de infusão.
- Sistema de freios na prateleira e no suporte.
- Prateleiras com ajuste de altura.
- Suporte para frasco coletor de 5 litros em aço inox evitando que produtos caiam no piso.

Delta 1100



Delta 2100



Delta Ergo



Delta Ergo Plus



Delta Ergo 4100



J.G.Moriya Ind. Com. de Equip. Médico Hospitalares Ltda.
Unidade I - - Rua Colorado, 279, 285 e 291
CEP 04225-050 - Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 6914-9716 - Fax: 55 11 6914-1943

Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br - www.jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade II - Rua da União, 377, 381 e 405
CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302

